

تعليمات و إرشادات الاستخدام

قم بإزالة جميع المكونات من العلبة. اقرأ جميع التعليمات بعناية. إذا كان لديك المزيد من الأسئلة أو الاستفسارات الرجاء

راسلتنا أو الإتصال بنا مباشرة على :

info@labcare.me

+971 6 55 66 086

محتويات العلبة:

العدد	العنوان	العنوان	العدد
1	كيس يحتوى: كحول معقم، ضماد لاصق، قطن	أنبوب جمع العينة معرف مسبقا	
1	قائمة الفحوصات المضافة	ب الباركود الخاص بك	
1	تعليمات الاستخدام	أداة وخز الإصبع UniStik	

جمع العينة


قم بتغريغ جميع المحتويات من العلبة. قم بتغريغ محتويات الكيس الحافظ.




عقم الإصبع الأوسط أو إصبع الخاتم باستخدام قطنة الكحول المرفقة. خصم الوقت الكافي ليجفف مكان التعقيم.



افتح غطاء أنبوب جمع العينة وضعه بشكل عمودي مستقيم و محكم في المكان المخصص.

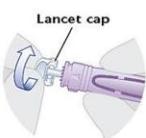

قم بإزالة أداة وخز الإصبع من مكانها. قم بلف الغطاء الواقي عدة مرات حتى تشعر بأن الغطاء الواقي انفصل عن الأداة. قم بسحب الغطاء برفق من مكانه. **تجنب إزالته بالقوة**

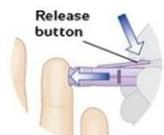

ضع أداة الوخز بشكل محكم على طرف الإصبع المعقم واضغط الزر. ستقوم الأداة بوخز الإصبع بشكل أوتوماتيكي للحصول على الدم.



قم بتوجيه الإصبع إلى الأسفل من مكان الوخز للسماح بتكوين نقط الدم. إذا دعت الحاجة. قم بعمل المساج للإصبع من القاعدة لزيادة تدفق الدم. قم بإسقاط ما يقارب 20 من الدم (1 مل) في أنبوب جمع العينة.



قم بوقف الدم عن طريق الضغط على مكان الوخز باستخدامقطن الناشف.

أغلق غطاء أنبوب جمع العينة وتأكد من إغفاله بإحكام. ضع الأنبوب في مكانه الأصلي بالعلبة. اتصل بالمخبر للقيام بجمع العينة

ملاحظة: الرجاء التأكيد من جمع عينة كافية من الدم لنتمكن من إجراء التحاليل المطلوبة إذا دعت الحاجة، قم بوخز إصبع ثان باستخدام أداة وخز جديدة للحصول على المزيد من الدم. تأكد من إغلاق الأنبوب بشكل محكم لمنع تسرب الدم. قم بالاتصال لأخذ العينة مباشرة بعد الانتهاء من جمعها. لا تقلق فالعينة مستقرة لغاية 4 ساعات من وقت جمعها

Instructions Sheet

Remove all components from the box. Read all instructions carefully . For any queries contact on
email info@test2home.com or phone number **+971 6 5566 086**

Kit Content:

Item	Qt.	Item	Qt.
Barcoded test tube specific for you	1	Bio-bag contains Alcohol	1
UniStik Lancet	2	Pads, Plaster, Dry Cotton	1
		Additional Test menu	1
		Instructions Sheet	1

Sample Collection

Remove all items from the box. Take out the items found inside the biohazard bag

Clean your ring or middle finger by rubbing with the alcohol swab provided. Allow to dry.




Open the test tube cap and place the tube in a vertical position firmly in the designated hole.



Take out the single use Lancet. Turn the lancet cap several times until you feel it is separated. Gently pull the cover and dispose. **DO NOT FORCE PULL**



Place the Lancet firmly on your cleaned fingertip and press the button. The lancet will automatically prick the finger

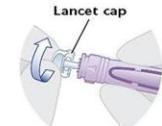

Point the finger downwards and allow blood to form a drop. If needed lightly massage the base of your finger to increase blood flow.



Collect approximately 1mL of blood (around 20 blood drops) into the test tube. Stop the bleeding by using the dry cotton .

Firmly re-cap the tube and make sure it is firmly capped (not leaking). Place the tube back again in its original place in the box. Call the lab for sample collection

Notes: Please make sure to collect enough blood sample to allow the lab to perform the tests requested. If more blood is needed, please prick a second finger using a new lancet "provided" using the same procedure. Make sure to tighten the cap of the tube upon closure to prevent blood leaks. Once collected, please call the lab for sample collection. Do not worry, your sample is stable for about 4 hours from the time of collection.